


MICRO-TOUCH® PF²

Gants de chirurgie en latex sans poudre

Une combinaison exceptionnelle de confort tactile et de protection

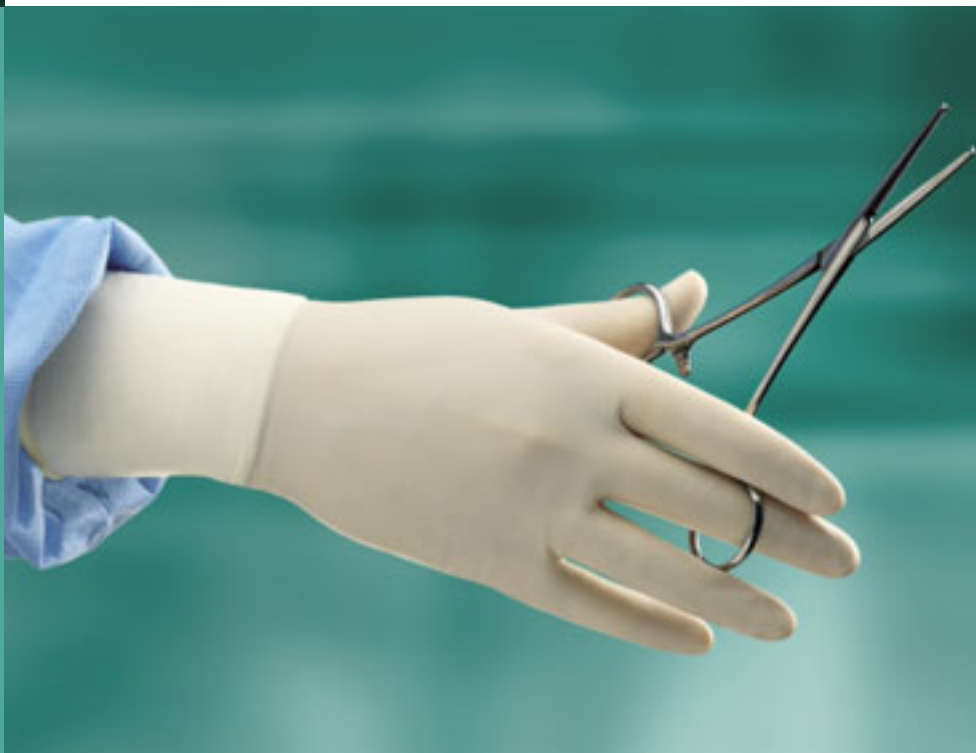

Le MICRO-TOUCH PF² d'Ansell appartient à la dernière génération de gants de chirurgie en latex sans poudre. Il a été conçu pour répondre aux nouvelles attentes en matière de sensations tactiles (gantage,

préhension et manipulation) et de protection au bloc opératoire. Ansell propose les gants chirurgicaux les plus sophistiqués du marché. MICRO-TOUCH PF² en est un bon exemple.

Ansell

Utilisations recommandées

Tous types d'interventions chirurgicales.

Confort et sûreté de préhension

Grâce à sa forme particulière, qui épouse parfaitement le contour des doigts et de la paume, le gant s'ajuste parfaitement à la main. Son film spécial en latex contient un composant exclusif qui accroît la flexibilité et l'élasticité du gant.

Sa surface externe garantit une manipulation précise des instruments en milieu sec ou humide.

Gantage aisé

Le gant MICRO-TOUCH PF² s'enfile facilement, même sur mains humides, grâce à son enduction interne synthétique (polyuréthane déposé en phase aqueuse). Cette enduction interne permet également un double gantage aisé, lorsqu'une protection supplémentaire est recherchée.

Spécifications

Code	Taille
352511	5.5
352512	6.0
352513	6.5
352514	7.0
352515	7.5
352516	8.0
352517	8.5
352518	9.0

Conditionnement

50 paires de gants par boîte, 4 boîtes par carton.

CE 0086

Ansell

Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d'Ansell couvrent trois secteurs: les gants de protection pour l'industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d'examen destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site <http://www.anselleurope.com>

Ansell SA
2, boulevard du Moulin à Vent BP 78395 Cergy 95805 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. +32 (0) 2 528 74 00 Télécopie 01 30 73 93 46 Télécopie Service Commandes 01 30 30 21 38
www.anselleurope.com E-mail : infofrance@ansellhealthcare.com

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com

MICRO-TOUCH® PF²

Gants de chirurgie en latex sans poudre

L'enduction interne synthétique constitue une barrière contre les allergènes potentiels du latex. Le gant présente un contenu protéique très faible, obtenu grâce à de longues phases de lessivage en ligne et en post-production. Il contient également peu de résidus chimiques. Sa formulation sans thiurames ni mercaptobenzothiazoles (MBT) contribue aussi à son faible potentiel allergique.

Conditionnement plus sûr et plus pratique

Les gants sont emballés dans une pochette pelable en polyéthylène, qui ne diffuse pas de fibres de papier susceptibles de contaminer l'environnement.

Si, suite à un problème, la soudure de la pochette n'est plus hermétique, la partie scellée devient opaque. L'utilisateur est ainsi prévenu que le produit n'est plus stérile.



Ansell